



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - БГ
IN 23095 Масажен уред inSPORTline Knair




СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
ДИСПЛЕЙ	4
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА	5
УПОТРЕБА	5
РЕЖИМ	5
ИНДИКАТОРИ	5
ПОДДРЪЖКА	6
СЪХРАНЕНИЕ	6
СПЕЦИФИКАЦИЯ	6
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ	6
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	6

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Можете да покриете електродите с влажна кърпа.
- Не потапяйте устройството във вода, не е водоустойчиво.
- Ако искате да регулирате позицията на устройството, първо го изключете. Никога не премествайте и не променяйте позицията на уреда, докато работи.
- Устройството не е играчка. Пазете далеч от деца.
- Ако се почувствате зле, спрете да използвате устройството и се свържете с Вашия лекар.
- Ако не ползвате устройството за известно време, презареждайте го поне веднъж месечно.
- Отстранете всички бижута и метални предмети от машината по време на употреба. Електродите могат да причинят късо съединение или токов удар при контакт с метални устройства.
- Не използвайте непрекъснато за повече от 30 минути.
- Не използвайте уреда, ако сте чувствителни към топлина.
- Не използвайте уреда на места с висока температура или висока влажност.
- Не използвайте уреда, ако имате кожни заболявания или наранявания.
- Не използвайте в близост до други устройства, които излъчват електромагнитни или високочестотни вълни.
- Не променяйте и не ремонтирайте устройството сами.
- Съхранявайте на сухо и добре проветриво място.
- Не поставяйте тежки предмети върху машината.
- Уредът се изключва автоматично след 15 минути употреба.
- Уредът не се употребява с медицинска цел.
- Устройството е предназначено само за домашна употреба.
- Продуктът не е подходящ за лица под 16 години.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Устройството не е подходящо за потребители с чувствителна кожа, високо или ниско кръвно налягане, мозъчно-съдови заболявания, тумори, нарушения на кръвенето, възпаления или други заболявания. Винаги се консултирайте с лекар преди употреба.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

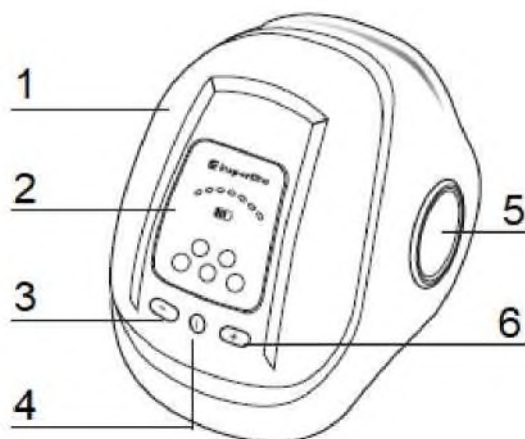

1. Масажен уред
2. Дисплей
3. Бутон за намаляване
4. Захранване / Режим
5. Индикатор / Светлина
6. Бутон за завишаване на стойността

ДИСПЛЕЙ

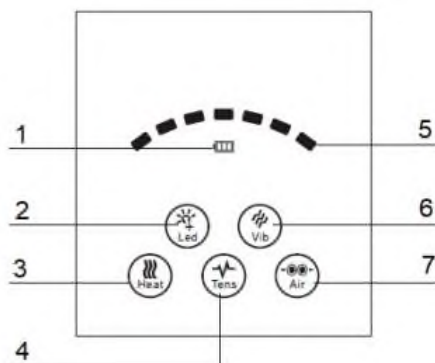

1. Състояние на батерията
2. Индикатор / Червена светлина
3. Загряване
4. Пулсиращ масаж
5. Интензивност
6. Масаж с вибрации
7. Въздушен масаж

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



Масажен уред



Електроди



USB кабел



Ръководство

УПОТРЕБА

1. Поставете масажора на коляното си (контролен панел с лице нагоре)
2. Натиснете бутона за захранване / стартов режим, за да стартирате устройството. Натиснете бутона за захранване/режим, за да превключите режима.
3. Можете да регулирате интензитета чрез натискане на + и - във всеки режим (14 нива).
4. Устройството се изключва автоматично след 15 минути работа.
5. Ако индикаторът започне да мига в червено, моля, заредете батерията.
6. Не използвайте устройството по време на зареждане.

Ако искате да използвате електроди, свържете електродите към порта и поставете електродите на необходимото място.

РЕЖИМИ

	Червен индикатор	Вибрации	Затопляне	Пулсиращ масаж	Въздушен масаж
Режим 1	*	*	*	*	*
Режим 2	*		*	*	*
Режим 3	*	*		*	*
Режим 4	*	*	*	*	
Режим 5	*			*	*
Режим 6	*			*	
Режим 7			*		
Режим 8					*

ЗАРЕЖДАНЕ

Ако нивото на батерията е ниско, индикаторът ще мига в червено.

Свържете щепсела към порта.

Докато индикаторът мига в червено, индикаторната светлина става синя, когато батерията е заредена.

Не използвайте устройството, докато се зарежда.

ПОДДРЪЖКА

- Винаги изключвайте продукта преди почистване.
- Почиствайте със суха, мека кърпа.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте далеч от деца.
- Да се пази далеч от слънчева светлина, високи температури и влажни места.
- Съхранявайте на сухо и проветриво място.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел	HZ-KNEE-2
Материал	ABS + PMMA
Тегло	745 g
Вход	5V 1A
Мощност	4W
Време за работа	15 min
Работна температура	45°C - 60°C (±5 °C)
Температура на околната среда	5 °C - 40 °C
Влажност	<80%

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Проблем	Причина	Решение
Не може да се стартира	Ниско ниво на батерията	Заредете батерията
Ниски вибрации или въздушен масаж	Ниско ниво на батерията	Заредете батерията
Не се зарежда	Проверете кабела	Сменете кабела за зареждане с нов

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или в случай, че ремонтът вече е икономически неизгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби за опазване на околната среда. Занесете продукта до най-близкия посочен пункт за събиране.

Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт.

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в официален пункт за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за предявяване на рекламация. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. "Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност. "Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон. Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилно сглобяване на уреда.
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифициран човек
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на

повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за икове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.



Офис:
Телефон:
E-mail:
Web:

Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
0894 566 060
office@yako.bg
www.yako.bg
www.insportline.bg