



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ –БГ

IN 26358 Компресионен масажор за крака inSPORTline
Beinhowair II



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	5
УПОТРЕБА	5
ВКЛЮЧВАНЕ	6
РЕЖИМ	6
КОНТРОЛЕР	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	8
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ.....	9

SevenSport sro си запазва правото да прави промени и подобрения на своя продукт без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg, за новата версия на ръководството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Моля, прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Не поправяйте и не модифицирайте продукта сами. Ако устройството е повредено, се свържете със сервиза отдел.
- Трябва да заредите контролера преди употреба.
- Не оставяйте без надзор около деца или лица с намалени умствени способности.
- Лица под настойничество или лица с ограничена подвижност или умствени способности могат да използват продукта само под наблюдението на възрастен и отговорен човек.
- Използвайте само в безопасна среда.
- Не съхранявайте на места, леснодостъпни за деца.
- Не използвайте, ако страдате от възпаление или имате увредена кожа (отворени рани, пукнатини, разширени вени, зачервяване, възпаление и др.)
- Не използвайте във вода (вана, душ и др.)
- Пазете от вода. Не потапяйте във вода или други течности.
- Не използвайте кабърчета или други метални предмети за закрепване.
- Дръжте продукта сух.
- Не използвайте във влажна среда.
- Не използвайте в помещения, където има аерозоли или висока концентрация на кислород.
- Използвайте ниска интензивност при първата употреба.
- Седнете или легнете по време на употреба.
- Не поставяйте чужди предмети в маркучите.
- Само за домашна употреба.
- Не носете дрехи, които могат да повредят продукта. (дрехи, които съдържат метални елементи или остри ръбове).
- Ако се появят някакви странични ефекти (зачервена или раздразнена кожа, обрив, сърбеж и др.), незабавно спрете употребата и се свържете с лекар.
- Преди всяка употреба проверявайте състоянието и функционалността на продукта.
- Устройството не служи като заместител на медицинските грижи. Ако почувствате болка или гадене, незабавно спрете употребата на устройството и се свържете с лекар. Ако не сте сигурни, винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате устройството.
- Ако някога сте имали следните заболявания, консултирайте се с лекар преди употреба: тумори, сърдечни заболявания, неправилно усещане за температура, загуба на съзнание, отворена рана на мястото на приложение, треска (поради възпаление, промяна в кръвното налягане и др.)

Не използвайте:

- По време на бременност или след раждане.
- Лица, които използват пейсмейкър или друг медицински имплант.
- Лица, страдащи от сърдечни или съдови заболявания.
- Лица, страдащи от абнормно кръвно налягане.
- Лица, страдащи от остеопороза, увреждане на гръбначния стълб, мускулно увреждане или друго остро заболяване.

- Лица, страдащи от тумори.
- Лица след операция.
- Хора с чувствителна кожа или проблеми с кръвообращението.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

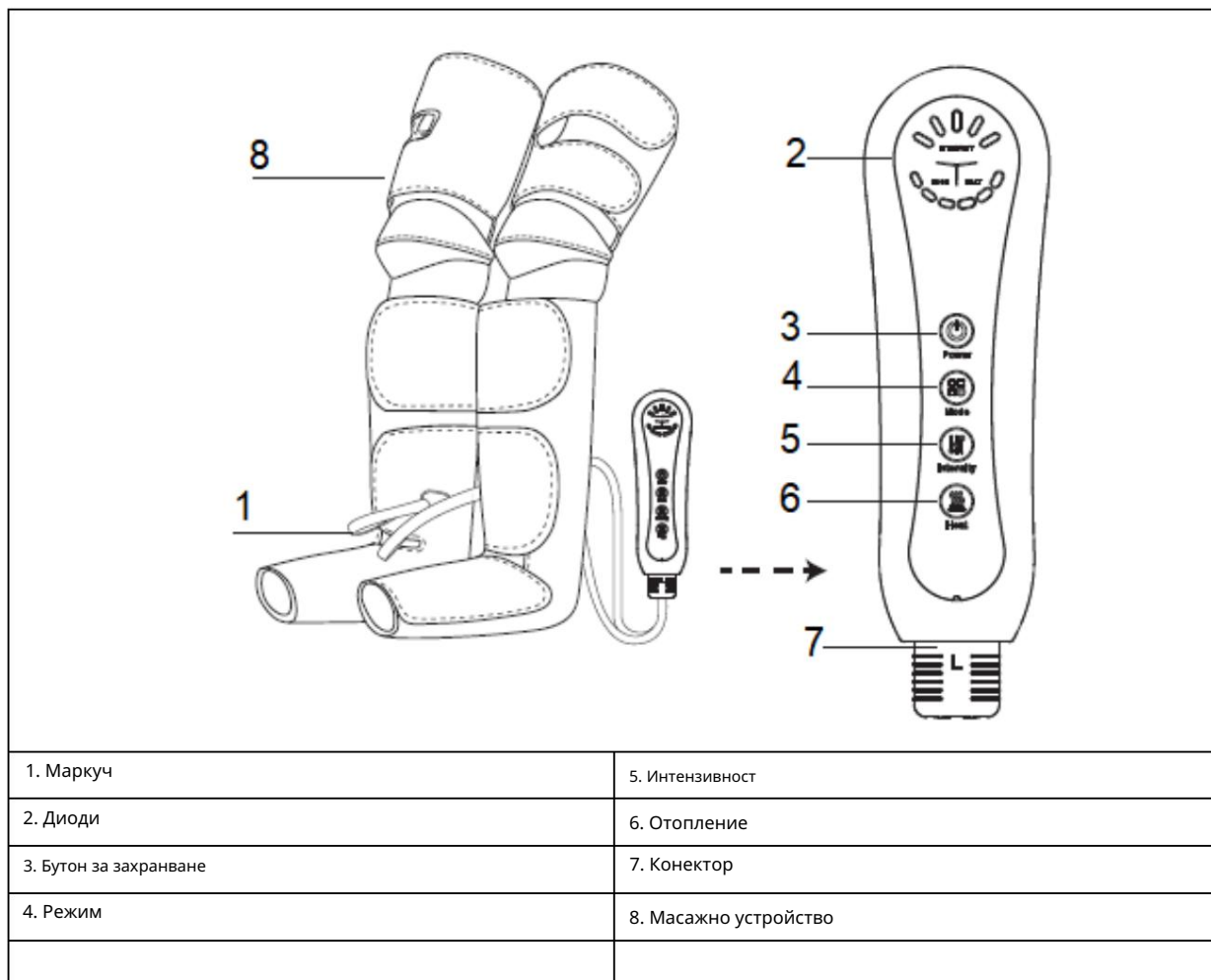


СПЕЦИФИКАЦИИ


Име	Масажор за крака с въздушна компресия
Спецификации на захранването	DC12V, 2A
Входна мощност	24W
Температура	40/45/50 °C (нисък/среден/висок интензитет)
Автоматично изключване	10/15/20/25/30 мин.
Препоръчително време за употреба	15 минути за всеки режим, 60 минути на ден
Интензивност на масажа	Крак: слаб: 30 кра, среден: 36 кра, висок: 38 кра
	Прасец, долна част: слаб: 22 кра, среден: 24 кра, висок: 30 кра
	Прасец, горна част: Ниско: 22 кра, Средно: 24 кра, Високо: 30 кра
Размери на регулируемите части	дължина на презрамката за бедро: 22 см
	макс. обиколка на бедрото: 70 см
	дължина на презрамката за прасеца: 38 см
	макс. обиколка на прасеца: 55 см
	дължина на каишката за крака: 25 см
	макс. обиколка на каишката за крака: 35 см
Маса	1,65 кг
Размери	71,5*25*18 см

ИЗПОЛЗВАНЕ

Включете конектора в контролера. Конекторът е маркиран (L – ляв, R – десен). Свържете конектора така, че L да сочи нагоре, а R – надолу.

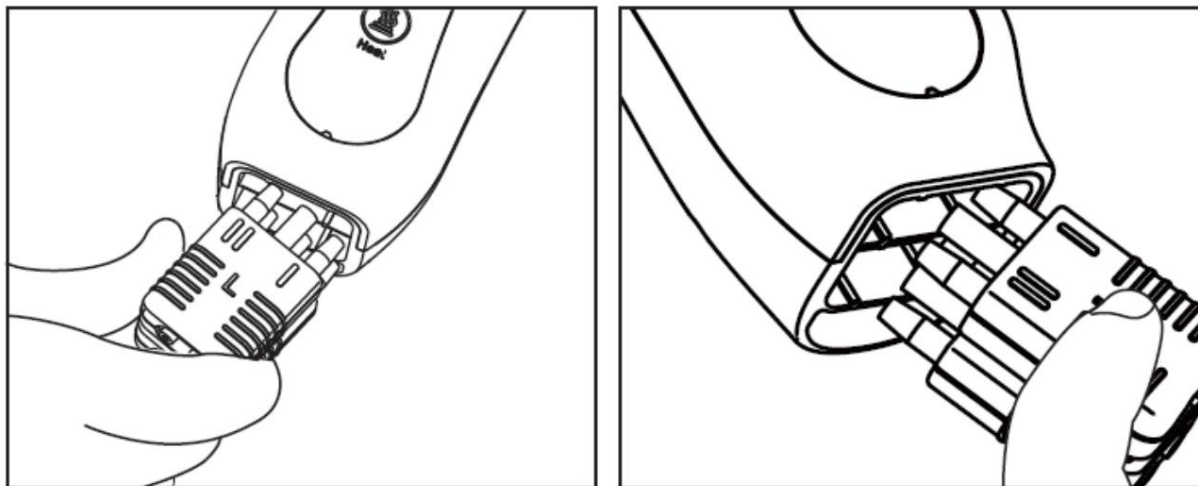


Поставете масажора в следния ред: стъпало – прасец (долна част) – бедро (горна част)

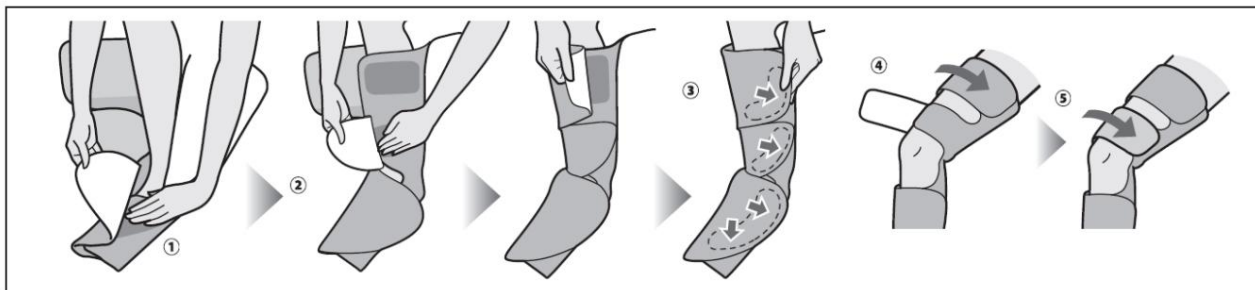

ВКЛЮЧВАНЕ

Натиснете бутона за захранване, за да стартирате продукта. Индикаторът светва. Натиснете кратко бутона за захранване, за да промените таймера. Всеки път, когато натиснете бутона, таймерът се увеличава с 5 минути, до 30 минути.

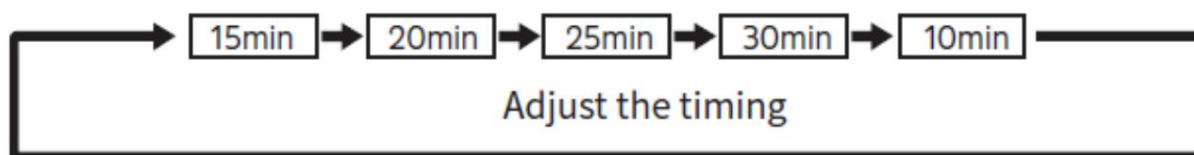

Задържете бутона за захранване за 3 секунди, за да изключите масажора. На дисплея се показва



РЕЖИМ

Чрез натискане на бутона за режим можете да промените вида масаж.

Последователен масаж (режим по подразбиране след стартиране)



Цикъл на масаж: горната част на бедрата се напompва и спада - долната част на прасеца и стъпалото се напompват и спадат - всички части се напompват и спадат, след което има кратка пауза и цикълът се повтаря

Цикличен масаж



Цикъл на масаж: горната част на бедрата се напompва и спада - долната част на прасеца и стъпалото се напompват и спада - напompва се и спада и цикълът се повтаря.

Комбиниран масаж



Масажът се извършва последователно: горната част на бедрата се напompва и спада - долната част на прасеца и стъпалото се напompва и спада - всички части се напompват и спадат, като има забавяне между всеки цикъл.

M1
Mode 1


M2
Mode 2

M3
Mode 3



КОНТРОЛЕР

Интензитет

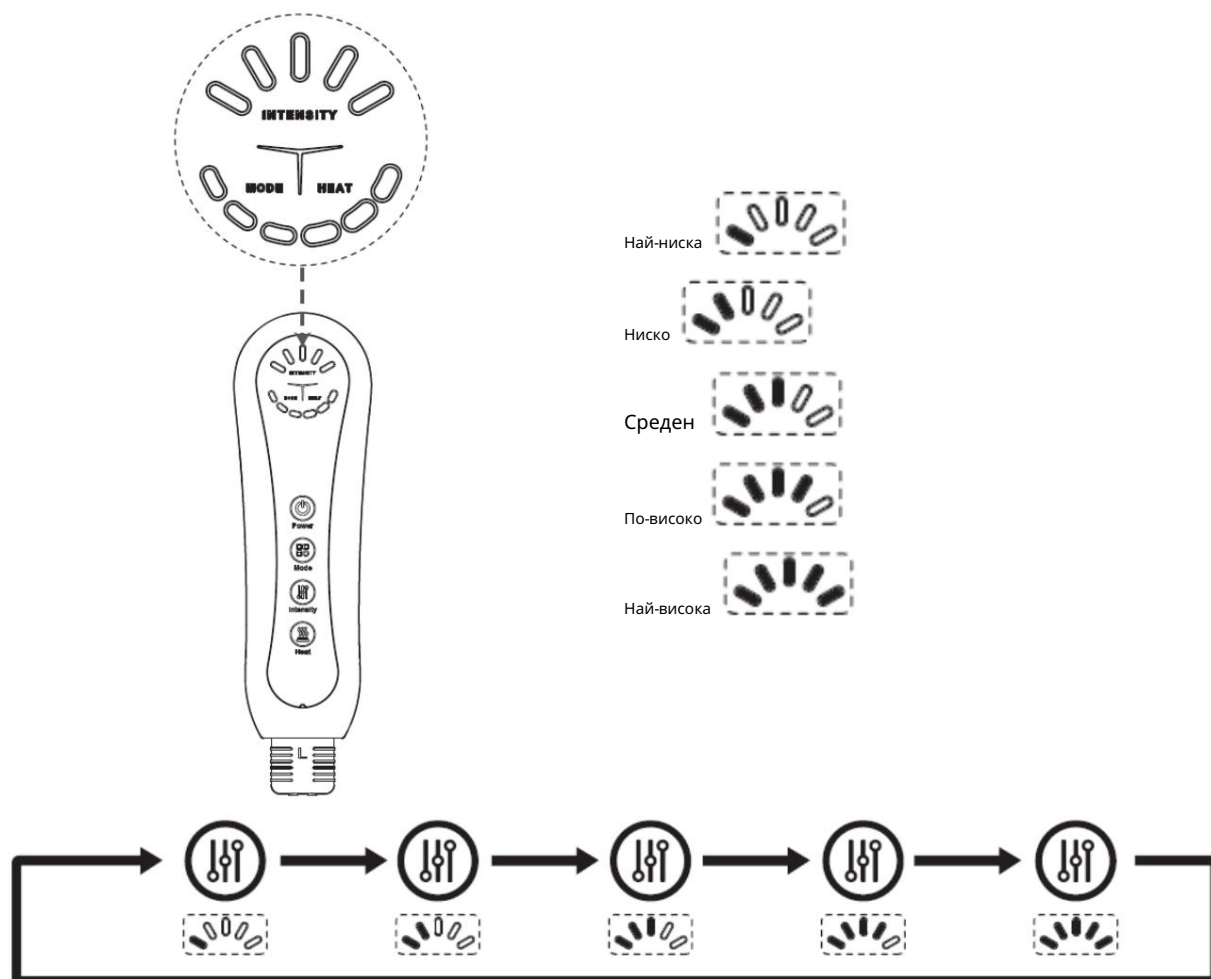

Отопление



Ниска температура (40°C)



Средна температура (45°C)



Висока температура (50°C)

Ако се показва на дисплея



, функцията за отопление е изключена.



ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди почистване изключете устройството и разкачете маркучите. Никога не използвайте разтворители и почистващи препарати на базата на бензен или алкохол.


Почиствайте продукта с влажна кърпа, напоена с хладка вода и разтвор от мек почистващ препарат (сапун и др.). Винаги подсушавайте продукта след почистване.

Никога не потапяйте и не перете в пералнята.

Не сушете в сушилня или в сушилня.

Защитете велкрото от замърсяване.

За съхранение, сгложете продукта според снимката и го съхранявайте в оригиналната опаковка.

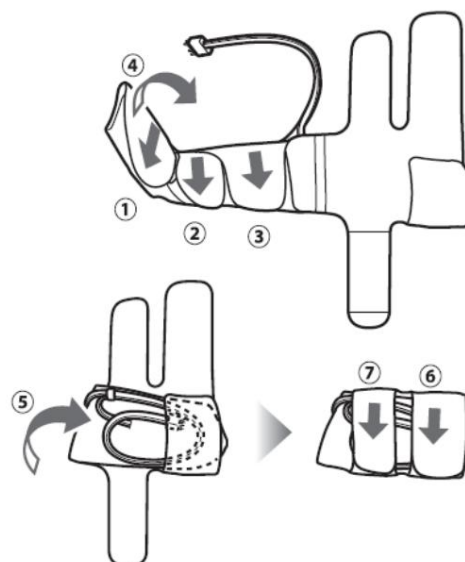

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Често срещани проблеми и възможни решения

Грешка	Решение
Не може да се стартира	Захранването не е свързано
Устройството спира да работи по време на работа	1. Захранването е прекъснато 2. Проверете дали маркучът е свързан 3. Проверете маркуча
Въздухът не тече	Повреден въздушен маркуч
Нагревателят не работи правилно	1. Загряването може да отнеме до 5 минути. 2. Твърде хлабав 3. Неправилно носене на продукта
Интензитетът е нисък	1. Твърде хлабав 2. Носите дебели дрехи
Интензитетът е висок	Разхлабете велкрото
Въздухът не може да бъде издухан	Разкачете контролера и маркучите

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако евентуалният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкия пункт за скрап.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, попитайте местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите сред битовите отпадъци, а ги предайте на място за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ

Общи гаранционни условия и определение на термините

Съгласно действащите закони разпоредби, зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен клиент“ или просто „Краен клиент“ е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява Договора с цел да осъществява или популяризира собствената си търговска или бизнес дейност.

„Купувач, който не е краен клиент“ е Търговец, който купува Стоки или ползва услуги с цел използване на Стоките или услугите за собствената си стопанска дейност. Купувачът се съобразява с Общия договор за покупко-продажба и търговските условия.

Настоящите гаранционни условия и гаранционни рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в договора за покупко-продажба, в изменението към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на Стоките, освен ако не е посочено друго в Гаранционния сертификат, Фактурата, Доставката или други документи, свързани със Стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, годни за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батерията – гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и курбелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (напр. износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирателни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна спирачка и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за гаранционна рекламация

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача, веднага след поемане на отговорност за Стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери Стоките, така че да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити чрез такава проверка.

При предявяване на гаранционна рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на рекламацията с фактура или товарителница, които съдържат серийния номер на продукта, или евентуално с документи без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната рекламация с тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната рекламация.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. в случай на неизпълнение на гаранционните условия или в случай на погрешно докладване на дефекта и др.), Продавачът има право да изиска обезщетение за всички разходи, произтичащи от ремонта. Цената се изчислява съгласно валидния ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната рекламация не се приема. Продавачът си запазва правото да поиска обезщетение за разходите, произтичащи от невярната рекламация по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви рекламацията относно Стоките, която е законово покрита от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът е длъжен да отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за предявяване на гаранционна рекламация, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в рамките на 30 дни след доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтната или заменената стока е предадена на Купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато Продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде постигнато, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансово обезщетение под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg