




ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – БГ

IN 27604 LED уред за светлинна терапия inSPORTline Coladome 300

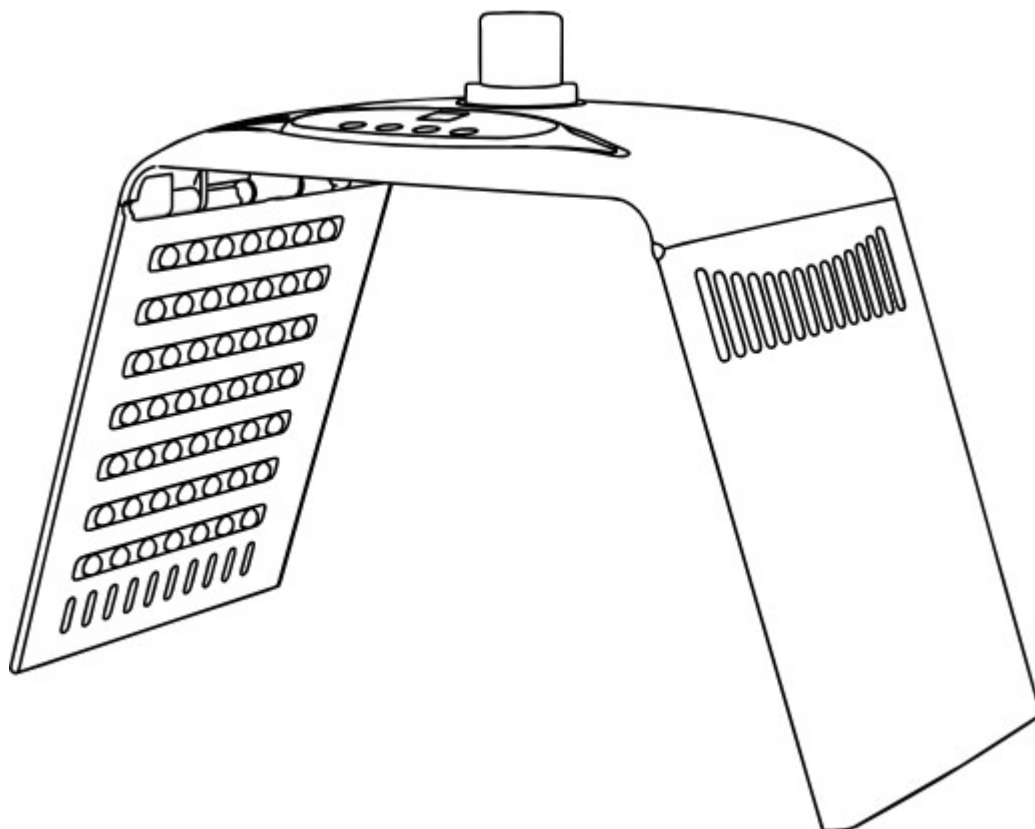

СЪДЪРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТНИ ИНСТРУКЦИИ	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
РАЗПОЛОЖЕНИЕ	4
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.....	5
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	6
ПОДДРЪЖКА	6
ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	6

SevenSport s.r.o. си запазва правото да извършва промени и подобрения на своя продукт без предизвестие. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg за най-новата версия на ръководството.

БЕЗОПАСНОСТНИ УКАЗАНИЯ

- Преди употреба прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Оставете ръководството на разположение и на другите потребители на продукта.
- Информирайте другите потребители за основните инструкции за безопасност и употреба.
- Устройството може да се използва само от опитни и пълнолетни лица, които познават устройството.
- Преди употреба се уверете, че LED светлините и уредът не са повредени.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на места с висока влажност (бани, сауни, басейни и др.).
- Използвайте само в добре проветриви помещения.
- Устройството трябва да бъде поставено върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Не излагайте уреда на удари или падания.
- По време на работа не използвайте други уреди, излъчващи топлина.
- Дръжте го далеч от вода.
- Не го включвайте в повредена контактна кутия.
- Не използвайте, ако кабелът или щепселът са повредени.
- След употреба изключете уреда и го извадете от контакта. Извадете уреда от контакта и за целите на поддръжка и почистване.
- Ако в уреда попадне вода, незабавно го изключете от електрическата мрежа.
- Ако уредът издава необичайни звуци или усетите миризма, незабавно спрете работата му и го извадете от електрическата мрежа.
- Не модифицирайте и не ремонтирайте уреда сами.
- Използвайте уреда само както е описано в ръководството. Всякаква друга употреба е забранена.
- Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина или открит огън.
- По време на работа не го покривайте с кърпа или други предмети.
- Почиствайте уреда само със суха кърпа.
- Не го използвайте, ако страдате от кожни заболявания, сърдечни проблеми, високо кръвно налягане, раздразнена или чувствителна кожа.
- Винаги носете предпазни очила!
- Препоръчителна работна температура: 0 – 26°C
- Препоръчителна температура на съхранение: 0 – 35°C
- Относителна влажност: <80%
- Честота на употреба: може да се използва 25 – 30 минути дневно в продължение на един месец или след всяка козметична процедура. При лечение на акне препоръчваме употреба 3 пъти седмично, поне 25 минути.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1. Контролен панел	5. LED
2. Контейнер	6. Захранващ кабел
3. Захранване	7. Защитни очила
4. Изход за пара	

РАЗПОЛОЖЕНИЕ


Преди разгъването е необходимо да изберете подходящо място за употреба, далеч от източници на топлина и други устройства.

Дръжте далеч от слънчева светлина и висока влажност. Използвайте в добре проветриво помещение със стабилна температура и влажност.



1. Отворете двете страни на машината и я поставете върху равна и стабилна повърхност.
2. Свържете захранващия кабел към уреда.
3. Свържете захранващия кабел към електрическата мрежа.
4. След стартиране данните се показват на дисплея.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

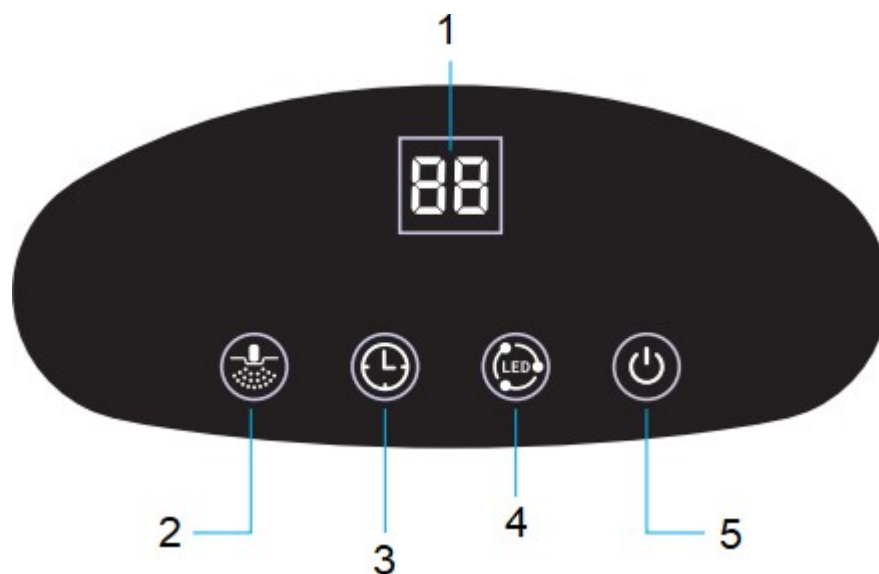

1. Дисплей	4. LED светлини
2. Пара	5. Изключвател
3. Таймер	



СТАРТИРАНЕ

След включване в електрическата мрежа уредът е в режим на готовност. Уредът се стартира с натискане на превключвателя. Запалва се LED индикаторът и таймерът за 30 минути.

За да изключите уреда, натиснете отново бутона за включване.



LED

Натискането на бутона за настройка на LED светлините ви позволява да изберете

една от 8 опции. 00 – режим на готовност

01 – червена светлина (дължина на вълната 647 – 760

nm) 02 – синя светлина (дължина на вълната 430 –

455 nm) 03 – зелена светлина (дължина на вълната

492 – 550 nm) 04 – жълта светлина (дължина на

вълната 550 – 580 nm)

05 – оранжева светлина (дължина на вълната 588 –

647 nm) 06 – лилава светлина (дължина на вълната

360 – 430 nm) 07 – тюркоазена светлина (дължина на

вълната 480 – 490 nm) 08 – променлива светлина



ТАЙМЕР

Началната стойност на таймера е 30 минути. С натискане на бутона можете да промените стойността с 5 минути до максималната стойност от 60 минути.

Диапазон на настройка на времето 0 – 60 минути.

Ако стойността не бъде променена в рамките на 3 секунди, устройството започва да работи с текущо зададената стойност.



ИЗХОД НА ПАРА

Първоначално функцията за пара е изключена. Натискането на бутона превключва между интензивността (01 най-ниска, 03 най-висока).

Не изливайте етерични масла или други козметични продукти в резервоара. Препоръчваме да използвате чиста вода.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване	DC12V, 3A, 50/60 Hz
Мощност	Около 36W
Размери	470x220x345 mm
Тегло	1,3 ±10

ПОДДРЪЖКА

- Почистете корпуса на уреда с мека кърпа.
- Съхранявайте на сухо и сенчесто място.
- За съхранение сгънете уреда.
- Преди всякаква манипулация или съхранение е необходимо да изключите уреда от електрическата мрежа.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтване е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който не вреди на околната среда. Занесете продукта в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе.

Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Попкупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

„Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.

Настоящите гаранционни условия и ред за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупка, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и редът за рекламации са валидни и задължителни, освен ако в договора за покупка или в приложение към този договор или в друго писмено споразумение страните не са се договорили друго.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача гаранция за качеството на стоките за срок от 24 месеца, освен ако от гаранционния лист, фактурата за стоките, доставната бележка или друг документ за стоките не следва различен срок на гаранцията, предоставен от продавача. Законовият срок на гаранцията, предоставен на потребителя, не се засяга от това.

С гаранцията за качество продавачът поема задължението, че доставената стока ще бъде годна за употреба за обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запази обичайните или договорените свойства.

Гаранционните условия не се отнасят за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта в резултат на некомпетентен ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалковата тръба в рамката, недостатъчно затягане на педалите в крилата и крилата към централната ос
- неправилна поддръжка
- механично увреждане
- износване на части при нормална употреба (например гумени и пластмасови части, подвижни механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касети/мултиколела и др.)
- непреодолимо събитие, природно бедствие
- непрофесионални намеси
- неправилна експлоатация или неподходящо разположение, влияние на ниски или високи температури, въздействие на вода, несъразмерно налягане и удари, умишлено променени дизайн, форма или размери

Регламент за рекламации

Процедура при рекламация на дефект на стоката

Купувачът е длъжен да провери стоката, доставена от продавача, възможно най-скоро след преминаване на риска от повреда на стоката, съответно след нейното доставяне. Проверката трябва да бъде извършена от купувача по начин, който да установи всички дефекти, които могат да бъдат открити при подходяща професионална проверка.

При рекламация на стоката купувачът е длъжен по искане на продавача да докаже покупката и основателността на рекламацията с фактура или доставна бележка с посочен производствен (сериен) номер, или със същите документи без сериен номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията с тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е обхванат от гаранцията (например не са изпълнени условията на гаранцията, дефектът е съобщен погрешно и т.н.), продавачът има право да изисква пълно покриване на разходите, възникнали във връзка с отстраняването на дефекта, съобщени по този начин от купувача. В този случай изчислението на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работни услуги и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на разходите, възникнали във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът рекламира дефекти на стоката, за които се отнасят гаранционните условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта чрез ремонт или замяна на дефектната част или устройство с безупречно. С съгласието на купувача продавачът има право да достави в замяна на дефектната стока друга стока, която е напълно функционално съвместима, но с минимум същите или по-добри технически параметри. Изборът на начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф принадлежи на продавача.

Продавачът ще разгледа рекламацията в срок от 30 дни от получаването на дефектната стока, освен ако не е договорен по-дълъг срок. За ден на разглеждане се счита денят, в който поправената или заменената стока

предадена на купувача. Ако продавачът, с оглед на характера на дефекта, не е в състояние да разгледа рекламацията в посочения срок, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на кредитно известие.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg