




УПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – BG
IN 26359 Компресионен масажор за колена inSPORTline
Mishair

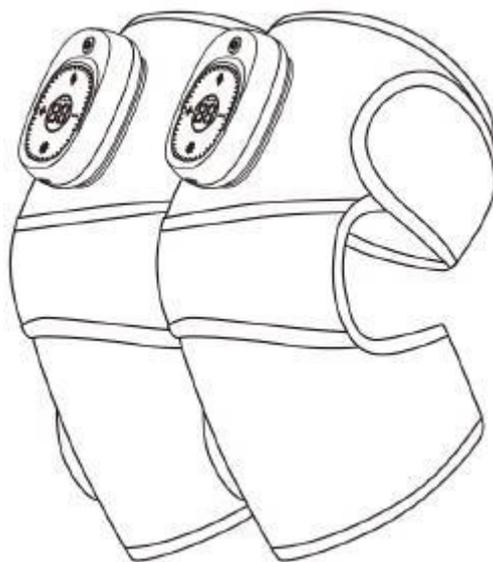

СЪДЪРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТНИ УКАЗАНИЯ.....	3
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	4
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ.....	4
УПОТРЕБА.....	4
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	6

SevenSport s.r.o. си запазва правото да извършва промени и подобрения на своя продукт без предизвестие. Посетете нашия уебсайт www.insportline.bg, където ще намерите най-новата версия на ръководството.

БЕЗОПАСНОСТНИ УКАЗАНИЯ

- Преди употреба прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами. В случай на повреда се свържете с отдела за рекламации.
- Преди употреба трябва да заредите контролера.
- Не го оставяйте без надзор в близост до деца или лица с намалени умствени способности.
- Лица с ограничени двигателни или умствени способности могат да използват продукта само под наблюдението на възрастен и отговорен човек.
- Използвайте само в безопасна среда.
- Не съхранявайте на места, достъпни за деца.
- Не използвайте, ако страдате от възпаления, имате подути крака или увредена кожа (отворени рани, пукнатини, разширени вени и др.).
- Не използвайте във вода (вана, душ кабина и др.).
- Дръжте далеч от вода. Не потапяйте във вода или други течности.
- Не използвайте пирони или други метални предмети за закрепване.
- Поддържайте продукта сух.
- Не използвайте в влажна среда.
- Не използвайте в помещения, където има аерозоли или висока концентрация на кислород.
- При първата употреба използвайте ниска интензивност.
- Използвайте продукта в седнало или легнало положение.
- Не поставяйте чужди предмети в маркучите.
- Само за домашна употреба.
- Не носете дрехи, които могат да повредят продукта (дрехи, които съдържат метални елементи или остри ръбове).
- Ако се появят нежелани реакции (зачервяване или раздразнение на кожата, обрив, сърбеж и др.), незабавно преустановете употребата и се свържете с лекар.
- Преди всяка употреба проверете състоянието и функционалността на продукта.
- Устройството не замества медицинската помощ. Ако почувствате болка или неразположение, незабавно преустановете употребата на устройството и се свържете с лекар. Ако не сте сигурни, винаги се консултирайте с лекар преди употреба на устройството.
- Ако някога сте страдали от следните заболявания, консултирайте се с лекар преди употреба: тумори, сърдечни заболявания, лоша преценка на температурата, загуба на съзнание, отворена рана на мястото на прилагане, треска (поради възпаления, промяна в кръвното налягане и др.).

Не използвайте, ако:

- По време на бременност или след раждане.
- Лица, които използват кардиостимулатор или друг медицински имплант.
- Лица, страдащи от сърдечни заболявания или заболявания на съдовете.
- Лица, страдащи от аномално кръвно налягане.

- Лица, страдащи от остеопороза, увреждане на гръбначния стълб, увреждане на мускулите или други остри заболявания.
- Лица, страдащи от тумори.
- Лица след операция.
- Лица с чувствителна кожа или с заболявания на кръвообращението.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Масажор за колене
Модел	TD01-FM-073
Стандарти	GB4706.1-2005 / GB 4706.10-2008
Размери	Контролер: 60x86x22 мм
	Продукт: 500x310x5 мм
	Дължина на кабела за зареждане: 1 м
Тегло	205 гр
Таймер	15 мин. работа
Материал	Основна част: полиестер, найлон, чимлон
	Контролер: ABS смола
Напрежение	5V
Мощност	10W
Зареждане	DC5V/500~200 mA USB тип C към USB
Капацитет на батерията	250 mAh
Зареждане	1 ~ 2 часа
Непрекъснат режим на работа	60 – 120 мин
Произведено в:	Китай

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ


- Почиствайте контролера само с мека суха кърпа.
- Почистете текстилните части с разтвор от вода и алкохол или с препарат за почистване на текстил. След почистване винаги подсушете продукта с кърпа. Не използвайте разтворители или почистващи препарати на бензинова основа.
- Никога не почиствайте електрическите части с вода.
- Съхранявайте продукта на сухо и сенчесто място, при ниска влажност и го предпазвайте от прах.
- Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка.
- Дръжте го далеч от деца.
- Преди съхранение, подредете правилно зарядния кабел.

УПОТРЕБА

Зареждане и батерия


- Преди употреба се уверете, че сте заредили контролера.

- Индикаторът за зареждане на батерията ще мига по време на зареждането. Когато индикаторът свети , батерията е заредена.
- Ако нивото на батерията е ниско, индикаторът ще мига.
- Времето за зареждане на батерията е 1 – 2 часа, а времето за работа с едно зареждане е 60 ~120 минути. Времето за работа може да варира в зависимост от околната температура и интензивността на масажа.
- Ако използвате продукта за по-дълго време, е необходимо да го заредите. Зареждайте продукта редовно на всеки 3 месеца.
- Не използвайте по време на зареждане.
- За зареждане можете да използвате всеки USB адаптер (5V, 500mA – 2000 mA).

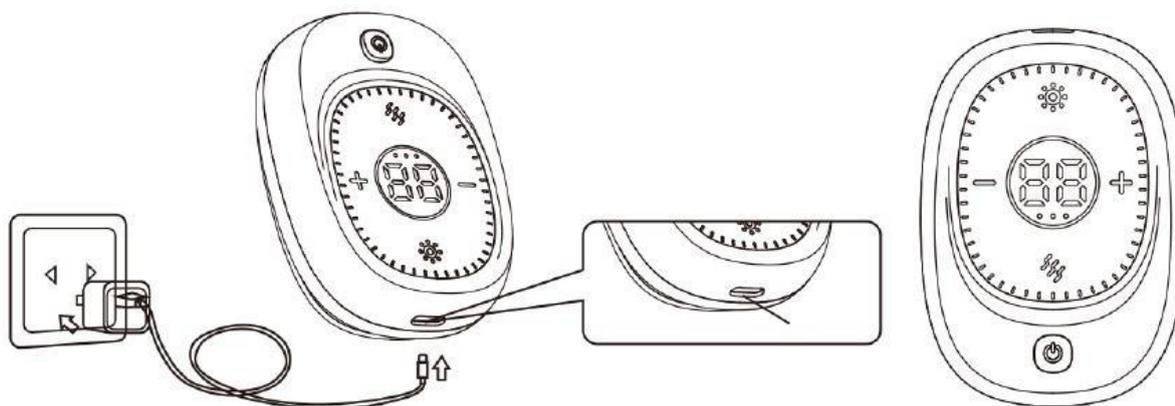


Управление

Закрепете според илюстрацията

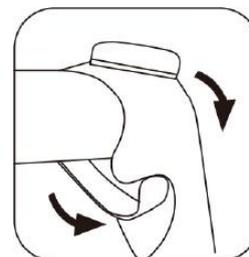


Задръжте бутона за включване . Устройството ще се включи, индикаторите ще светнат и ще се чуе звуков сигнал. (Ако не може да се включи, устройството трябва да се зареди.)

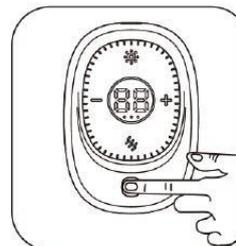


Натиснете бутона за нагряване , за да стартирате нагряването, и използвайте бутоните + и -, за да регулирате температурата. Когато достигнете горната граница, ще чуете звуков сигнал. Дисплеят ще покаже текущата температура на нагряване.


5 режима на нагряване: 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 00°C (изключено)

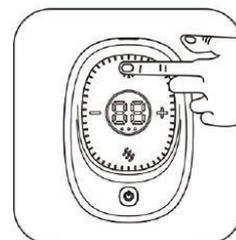


Натискането на бутона за вибрации  стартира промяната на вибрациите, а с помощта на бутоните + и – можете да регулирате типа на вибрациите. Дисплеят показва текущия режим на вибрациите: 01, 02, 03, 00 (изключено)

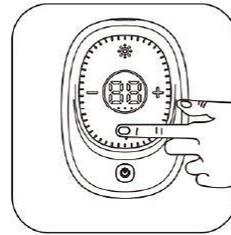


За да настроите таймера, натиснете бутона за включване. Първоначалната стойност е 15 минути. Натискането на бутона увеличава стойността с 5 минути до максимум 30 минути, минималното време на работа е 5 минути. Ако по време на настройката превишите стойността 30 минути, таймерът ще започне да отброява от най-ниската стойност. Таймерът е заключен за 10 секунди след стартиране. За да отключите контролера, натиснете бутона за включване.

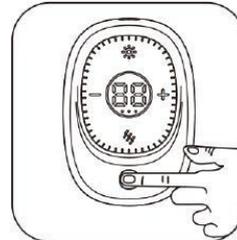

За да изключите, задръжте бутона за включване/изключване  за 2 секунди.

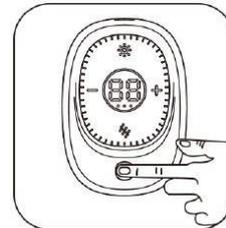

Възможни приложения

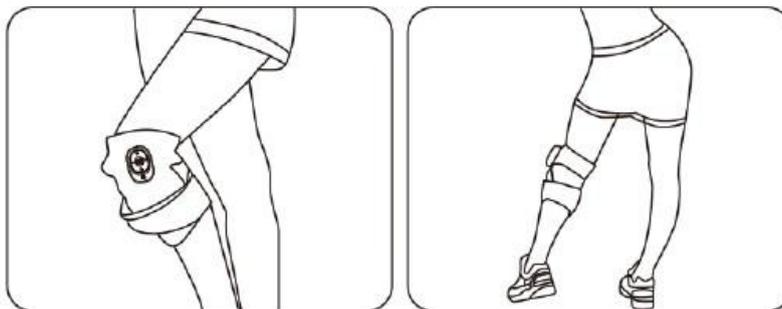

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтване е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който не вреди на околната среда. Занесете продукта в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg