




УПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – BG
IN 26357 Компресионен масажор за крака inSPORTline Vrandair

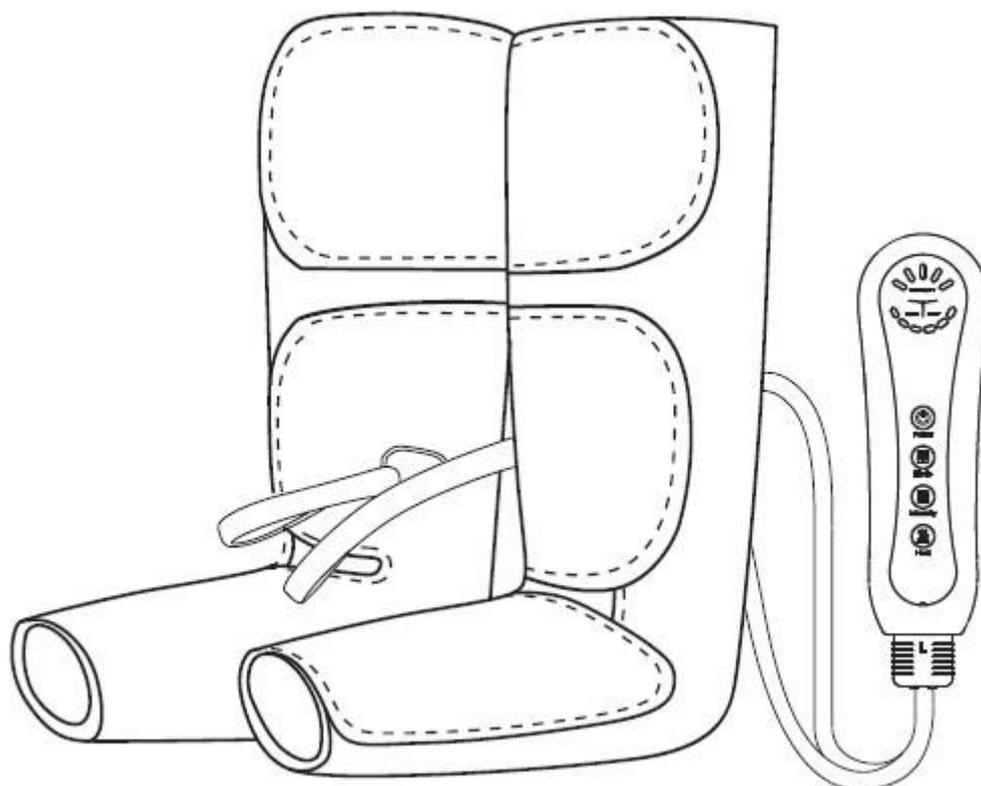

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	5
УПОТРЕБА.....	5
СТАРТИРАНЕ.....	6
РЕЖИМ.....	6
УПРАВЛЕНИЕ.....	7
ПОЧИСТВАНЕ И СКЛАДИРАНЕ	8
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	9
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ.....	9

SevenSport s.r.o. си запазва правото да извършва промени и подобрения на своя продукт без предизвестие. Посетете нашия уебсайт www.insportline.bg, където ще намерите най-новата версия на ръководството.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Преди употреба прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами. В случай на повреда се свържете с отдела за рекламации.
- Преди употреба трябва да заредите контролера.
- Не го оставяйте без надзор в близост до деца или лица с намалени умствени способности.
- Лица под опека или лица с ограничени двигателни или умствени способности могат да използват продукта само под наблюдението на възрастен и отговорен човек.
- Използвайте само в безопасна среда.
- Не съхранявайте на места, достъпни за деца.
- Не използвайте, ако страдате от възпаления или имате увредена кожа (отворени рани, пукнатини, разширени вени, зачервяване, възпаление и др.).
- Не използвайте във вода (вана, душ кабина и др.).
- Дръжте далеч от вода. Не потапяйте във вода или други течности.
- Не използвайте пирони или други метални предмети за закрепване.
- Поддържайте продукта сух.
- Не използвайте във влажна среда.
- Не използвайте в помещения, където има аерозоли или висока концентрация на кислород.
- При първата употреба използвайте ниска интензивност.
- По време на употреба седнете или легнете.
- Не поставяйте чужди предмети в маркучите.
- Само за домашна употреба.
- Не носете дрехи, които могат да повредят продукта (дрехи, които съдържат метални елементи или остри ръбове).
- При поява на нежелани реакции (зачервяване или раздразнение на кожата, обрив, сърбеж и др.) незабавно преустановете употребата и се свържете с лекар.
- Преди всяка употреба проверете състоянието и функционалността на продукта.
- Устройството не замества медицинската помощ. Ако почувствате болка или неразположение, незабавно преустановете работата на устройството и се свържете с лекар. Ако не сте сигурни, винаги се консултирайте с лекар преди употреба на устройството.
- Ако някога сте страдали от следните заболявания, консултирайте се с лекар преди употреба: тумори, сърдечни заболявания, неточно оценяване на температурата, загуба на съзнание, отворена рана на мястото на прилагане, треска (поради възпаления, промяна в кръвното налягане и др.).

Не използвайте, ако:

- По време на бременност или след раждане.
- Лица, които използват кардиостимулатор или друг медицински имплант.
- Лица, страдащи от сърдечни заболявания или заболявания на кръвоносните съдове.
- Лица, страдащи от аномално кръвно налягане.

- Лица, страдащи от остеопороза, увреждане на гръбначния стълб, увреждане на мускулите или други остри заболявания.
- Лица, страдащи от тумори.
- Лица след операция.
- Лица с чувствителна кожа или с заболявания на кръвообращението.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

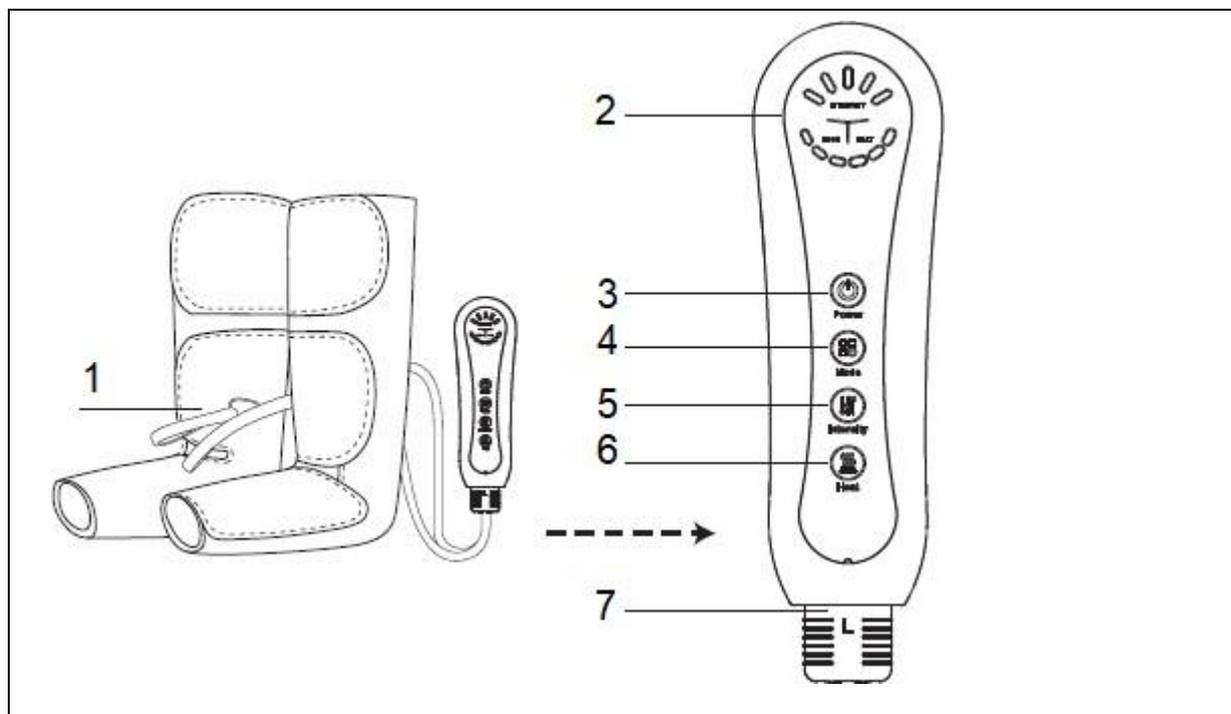


1. Маркуч	5. Мощност
2. Диоди	6. Отопление
3. Бутон за включване	7. Конектор
4. Режим	

СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Масажор за крака с въздушна компресия
Спецификация на захранването	DC12V, 2A
Консумирана мощност	24 W
Температура	40/45/50 °C (ниска/средна/висока интензивност)
Автоматично изключване	10/15/20/25/30 мин
Препоръчително време за употреба	15 мин за всеки режим, 60 мин на ден
Интензивност на масажа	Стъпало: слаба: 30 кра, средна: 36 кра, силна: 38 кра
	Прасец, долна част: слаба: 22 кра, средна: 24 кра, висока: 30 кра
	Прасец, горна част: слаба: 22 кра, средна: 24 кра, силна: 30 кра
Размери на регулируемите части	дължина на ремъка за прасците: 41 см
	макс. обиколка на ремъка за прасеца: 55 см
	дължина на ремъка за стъпалата: 25 см
	макс. обиколка на ремъка за стъпалата: 41 см
Тегло	1,4 кг
Размери	71,5*25*18 см


УПОТРЕБА

Свържете конектора към контролера. Конекторът е маркиран (L – ляв, R – десен). Свържете конектора така, че L да сочи нагоре, а R надолу.

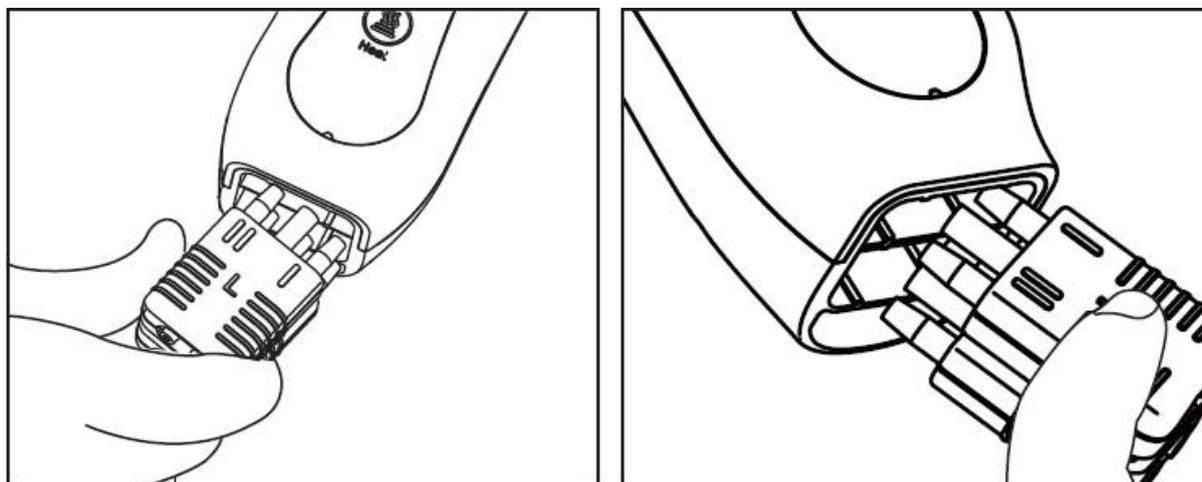

Поставете масажния апарат в следния ред: стъпало – прасец (долна част) – прасец (горна част)

[Grab your reader's attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.]

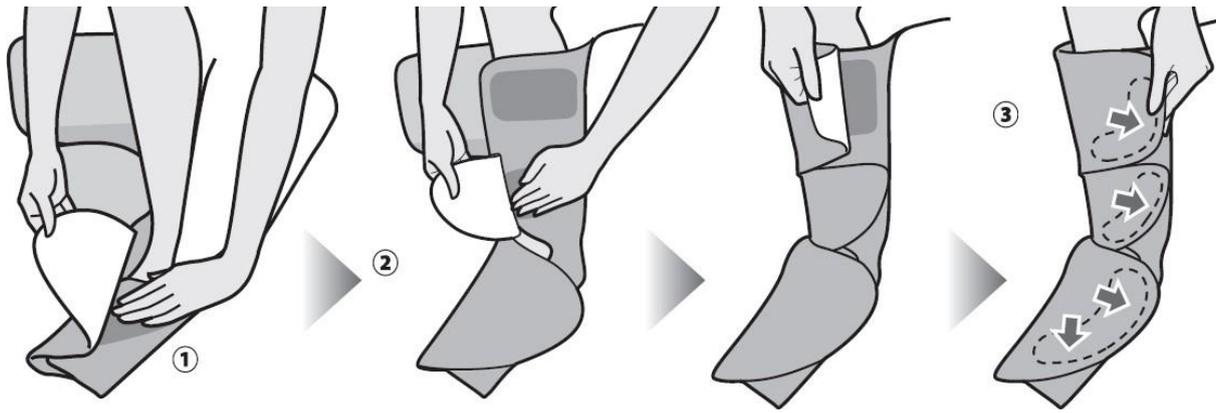

СТАРТИРАНЕ

Натиснете бутона за включване, за да стартирате продукта. Индикаторът ще светне. С кратко натискане на бутона за включване променят таймера. С всяко натискане на бутона таймерът се увеличава с 5 минути, до 30 минути.



За да изключите масажния апарат, задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди. На дисплея ще се появи надпис „“.

РЕЖИМ

Натискането на бутона за режим ви позволява да промените типа на масажа.

Последователен масаж



След стартиране устройството активира масажните зони последователно.

Първо се стимулира горната част на прасеца, след което масажът преминава към долната част на прасеца и стъпалото. Накрая се активират всички зони едновременно, след което следва кратка пауза и цикълът се повтаря.



Цикличен масаж

Масажът се извършва в непрекъснат ритмичен цикъл.



Горната част на прасеца, долната част и стъпалото се активират последователно, без пауза между отделните етапи, като цикълът се повтаря непрекъснато по време на работа.

Комбиниран масаж





Комбинираният режим съчетава последователна и едновременна стимулация.

Масажът започва от горната част на прасеца, преминава към долната част и стъпалото, след което всички зони се активират едновременно. Между отделните цикли има кратка пауза.

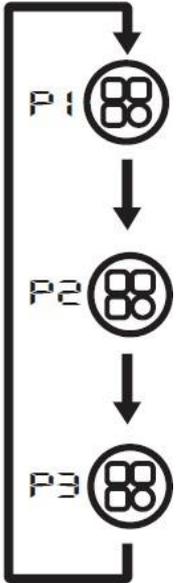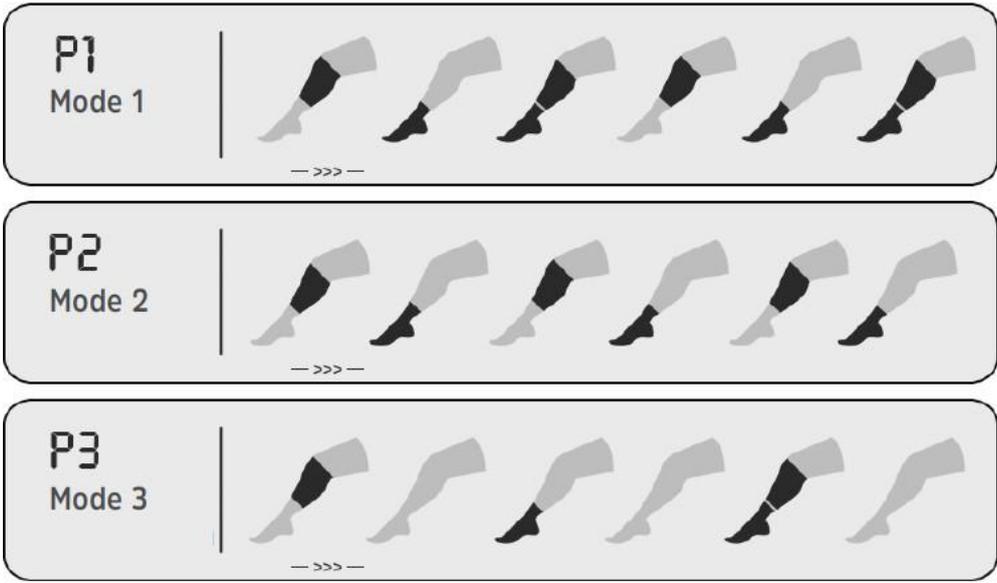

УПРАВЛЯВАЩ

ИНТЕНЗИВНОСТ (ИНТЕНЗИВНОСТ)

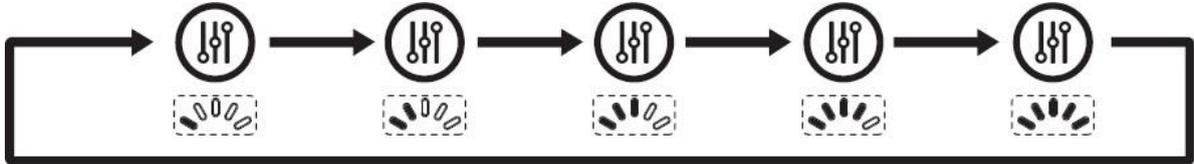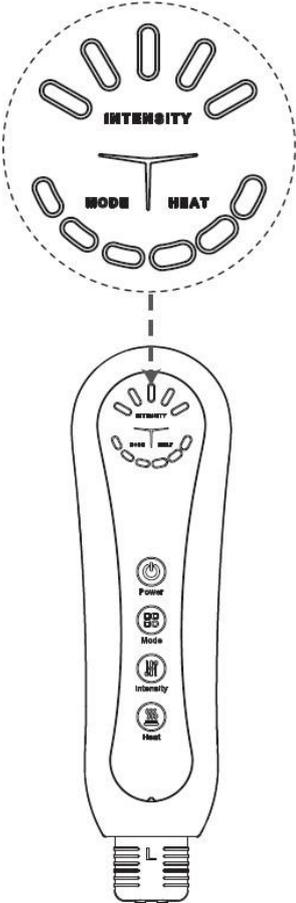

Отопление (heat)



Ниска температура (40°C)




Средна температура
(45°C)




Висока температура
(50°C)

Ако на дисплея се показва

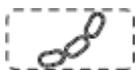

, функцията за отопление е изключена.

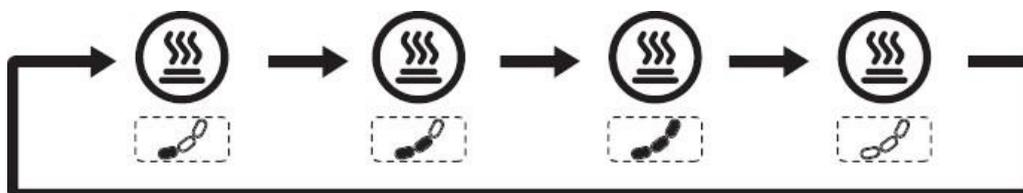

Отоплението е само в областта на коленете.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ


Преди почистване изключете уреда и извадете маркучите. Никога не използвайте разтворители и почистващи средства на базата на бензен или алкохол.

Почистете продукта с влажна кърпа, напоена с хладка вода и разтвор от нежен почистващ препарат (сапун и др.). След почистване винаги подсушете продукта.

Никога не потапяйте и не перете в пералня. Не сушете чрез центрофуга или в сушилня.

Предпазвайте велкрото от замърсявания.

За съхранение сгънете продукта според илюстрацията и го съхранявайте в оригиналната опаковка.

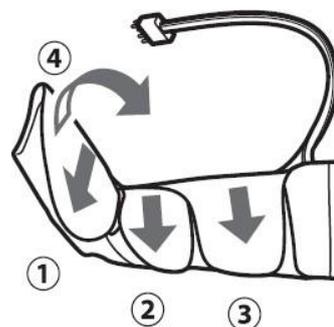

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Чести проблеми и възможни решения

Проблем	Решение
Не може да се стартира	Устройството не се захранва
Устройството спира да работи по време на експлоатация	1. Проверете дали батерията е заредена 2. Проверете дали маркучът е правилно свързан 3. Проверете състоянието на маркуча
Въздухът не преминава	Повреден въздушен маркуч
Отоплението не работи правилно	1. Загряването на тялото трае около 5 минути 2. Свободно поставено устройство 3. Неправилно поставен апарат
Интензивността е ниска	1. Свободно поставено устройство 2. Носите дебели дрехи.
Интензивността е висока	Разкопчайте велкрото
Въздухът не може да се изпусне	Изключете контролера и маркуча.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтване е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който е щадящ към околната среда. Занесете продукта в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения

Настоящите гаранционни условия и ред за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за разглеждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и рекламационният ред се ръководят от съответните разпоредби на Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс, и Закон № 634/1992 Сб., за защита на потребителите, в редакцията на по-късните разпоредби, и то дори в случаи, които не са упоменати в тези гаранционни условия и рекламационен ред.

Продавачът е дружеството SEVEN SPORT s.r.o. със седалище на адрес Strakonická 1151/2c, Прага 150 00, ИД: 26847264, вписано в търговския регистър, воден от Окръжния съд в Прага, раздел С, вписване 116888.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Покупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

„Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.

Настоящите гаранционни условия и ред за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупка, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и редът за рекламации са валидни и задължителни, освен ако в договора за покупка или в приложение към този договор или в друго писмено споразумение страните не са се договорили друго.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача гаранция за качеството на стоките за срок от 24 месеца, освен ако от гаранционния лист, фактурата за стоките, доставната бележка или друг документ за стоките не следва различен срок на гаранцията, предоставен от продавача. Законовият срок на гаранцията, предоставен на потребителя, не се засяга от това.

С гаранцията за качество продавачът поема задължението, че доставената стока ще бъде годна за употреба за обичайната или договорена цел за определен период от време и че ще запази обичайните или договорени свойства.

Батерия

Гаранция 6 месеца за живота на батерията – номиналната капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия си капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранционните условия не се отнасят за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта в резултат на некомпетентен ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалковата тръба в рамката, недостатъчно затягане на педалите в крилата и крилата към централната ос
- неправилна поддръжка
- механично увреждане
- износване на части при нормална употреба (например гумени и пластмасови части, подвижни механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касети/мултиколела и др.)
- неотвратимо събитие, природно бедствие
- непрофесионални намеси
- неправилно боравене или неподходящо разположение, влияние на ниска или висока температура, въздействие на вода, несъразмерно налягане и удари, умишлено променени дизайн, форма или размери

Регламент за рекламации

Процедура при рекламация на дефект на стоката

Купувачът е длъжен да провери стоката, доставена от продавача, възможно най-скоро след преминаване на риска от повреда на стоката, съответно след нейното доставяне. Проверката трябва да бъде извършена от купувача по начин, който да установи всички дефекти, които могат да бъдат открити при подходяща професионална проверка.

При рекламация на стоката купувачът е длъжен по искане на продавача да докаже покупката и основателността на рекламацията с фактура или доставна бележка с посочен производствен (сериен) номер, или със същите документи без сериен номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията с тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е обхванат от гаранцията (например не са изпълнени условията на гаранцията, дефектът е съобщен погрешно и т.н.), продавачът има право да изисква пълно покриване на разходите, възникнали във връзка с отстраняването на дефекта, съобщен по този начин от купувача. В този случай изчислението на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работни услуги и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на разходите, възникнали във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът рекламира дефекти на стоката, за които се отнасят гаранционните условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта чрез ремонт или замяна на дефектната част или устройство с безупречно. Продавачът има право, със съгласието на купувача, да достави в замяна на дефектната стока друга стока, която е напълно функционално съвместима, но с минимум същите или по-добри

технически параметри. Изборът на начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф принадлежи на продавача.

Продавачът ще разгледа рекламацията в срок от 30 дни от получаването на дефектната стока, освен ако не е договорен по-дълъг срок. За ден на разглеждане се счита денят, в който поправената или заменената стока е предадена на купувача. Ако продавачът, предвид характера на дефекта, не е в състояние да разгледа рекламацията в посочения срок, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на кредитно известие.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg